



reflexx[®]

I N S A F E H A N D S



22.09.2021

DPI guanti: questi sconosciuti

COME SCEGLIERE I GUANTI GIUSTI

Come scegliere i guanti giusti ?

1 MATERIALI


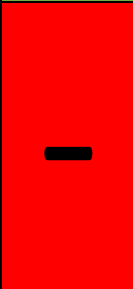
2 FINITURA interna ed esterna

3 LUNGHEZZA, SPESSORE/PESO

4 NORMATIVA

1

Materiali a confronto

	Lattice
	<p>Eccellente elasticità anche a bassa temperatura.</p> <p>Impermeabile e buona biodegradabilità.</p>
	<p>Possibili sensibilizzazioni in soggetti predisposti.</p> <p>Costi materia prima volatili.</p>

2

Finitura interna

POLVERE

- Amido di mais
- Facilita le operazioni di calzata
- Potenziale rischio contaminazione e aumento proteine

CLORINATURA (Senza Polvere)

- Trattamento in acqua clorata, seguito da risciacqui
- Facilita le operazione di calzata in assenza di polvere
- RIDUCE LE PROTEINE DEL LATTICE nei guanti in lattice e riduce i residui chimici nei guanti in Nitrile

RIVESTIMENTO CON POLIMERI (Senza Polvere)

- Inserimento di polimeri sferici per facilitare la calzata



2 Finitura esterna



Liscia



Puntinato



Microruvida

Sulle dita

Su dita e palmo

3

Lunghezza guanti monouso

Guanto monouso tradizionale



24cm

Guanto monouso lungo



28-30cm

- Più protezione sull'avambraccio
- Si sovrappongono agli indumenti
- Più sicurezza grazie all'elevato spessore

3 Spessore - Peso

- **Nitrile** spessori minimi 0,05mm al palmo
 - Sotto i 3 gr. non garantiscono AQL e Resistenza
- **Lattice** 0,07/0,08mm
 - Sotto i 5-5,5 gr. non garantiscono AQL e Resistenza
- **Vinile** 0,07mm
 - Sotto i 4,5 gr. non garantiscono AQL e Resistenza

4

NORMATIVE

- **Reg. EU 2016/425** ex Dir.89/686/CEE
- EN ISO 21420: 2020 ex EN 420/2003
- EN ISO 374-1: 2016– rischio chimico
- EN ISO 374-5: 2016 – rischio da microrganismi e virus
- EN 388:2016 – resistenza meccanica

DPI

- **Nuovo MDR 2017-745** e EN 455-1, 2, 3, 4

DM

- DM 21/03/1973, Reg. EU 10/2011, Reg. CE 1935/2004

MOCA

N71

reflexx
IN SAFE HANDS

reflexx
IN SAFE HANDS

NITRILE gloves | **POWDER FREE**
Guanti in NITRILE | SENZA POLVERE

M

100 PCS BY WEIGHT AOL ≤ 1.5



REFLEX S.p.a. > Via Passeri, 2 - Viadana - MN - ITALY - www.reflexx.com

Etichettatura

Indicazione
Fabbricante
Europeo



EN USER INFORMATION: Multi-purpose glove to protect the hand and / or the handled product • Glove suitable for contact with pure chemical products for less than the permeation time indicated in the chemical resistance table • The results obtained under laboratory conditions may not reflect the service life when used. **WARNING:** Before using the product, try it in real conditions • Device subject to wear, frequent replacement is recommended and in all cases where imperfections are seen • Wear gloves with clean dry hands • In rare cases where transient hypersensitive skin reactions may occur, discontinue use and consult a doctor. **STORAGE AND DISPOSAL:** The indicated expiration is valid for the product duly stored in the sales package • Dispose of according to local regulations • Declaration of Conformity on www.reflexx.com

I CONSIGLI DI UTILIZZO: Guanto polivalente a protezione della mano e/ou del prodotto manipolato • Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato in tabella di resistenza chimica • I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso. **AVVERTENZE:** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nelle reali condizioni di utilizzo • Dispositivo soggetto ad usura, è raccomandata la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni • Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite • Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico. **CONSERVAZIONE E ELIMINAZIONE:** La scadenza indicata è valida per il prodotto debitamente conservato nella confezione di vendita • **Smaltimento secondo le normative locali • Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com**

F CONSEILS D'UTILISATION: Gant polyvalent pour la protection de la main et/ou du produit manipulé • Adapté au contact avec des produits chimiques purs pendant une période de temps inférieure à celle de perméation indiquée dans le tableau de résistance chimique • Les résultats obtenus dans des conditions de laboratoire pourraient ne pas correspondre à la durée réelle lors de l'utilisation. **AVERTISSEMENTS:** Avant d'utiliser le produit, l'essayer dans des conditions d'utilisation réelles • Matériel sujet à l'usure, à remplacer fréquemment notamment en cas d'imperfections visibles • Porter les gants sur des mains sèches et propres • Dans les rares cas de réactions cutanées transitoires et d'ypersensibilité, cesser l'utilisation et consulter un médecin. **CONSERVATION ET ELIMINATION:** La date limite indiquée n'est valable que si le produit est conservé correctement dans son emballage d'origine • **Éliminer conformément aux réglementations locales • Déclaration de Conformité sur www.reflexx.com**

ES CONSEJOS DE USO: Guante polivalente para proteger la mano y/o el producto manipulado • Guante adecuado para el contacto con productos químicos puros durante un periodo de tiempo inferior al de permeación indicado en la tabla de resistencia química • Los resultados obtenidos en condiciones de laboratorio puede que no reflejen la duración efectiva en uso. **ADVERTENCIAS:** Probar el producto en condiciones reales de uso antes de utilizarlo • Dispositivo sujeto a desgaste, se recomienda el cambio frecuente y siempre que se observen imperfecciones • Llevar la manos secas y limpias al ponerse los guantes • En caso de que observe reacciones cutáneas transitorias y de hipersensibilidad, suspender el uso y consultar a un médico. **CONSERVACION Y ELIMINACION:** La caducidad indicada se aplica al producto debidamente conservado en el envase de venta • **Eliminar según las normativas locales • Declaración de Conformidad en www.reflexx.com**

D ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: Mehrzweckhandschuh zum Schutz der Hand bzw. des manipulierte Produktes • Handschuh geeignet für den Kontakt mit reinen chemischen Produkten für eine Dauer, die unterhalb der in der Tabelle der chemischen Resistenz angegebenen Durchdringungszeit liegt • Die Ergebnisse, die unter den im Labor vorherrschenden Bedingungen erhalten wurden, spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche Nutzungsdauer wider. **WARNHINWEISE:** Vor Verwendung des Produktes muss es unter den tatsächlichen Verwendungsbedingungen getestet werden • Ausrüstung unterliegt Verschleiß, die Ausrüstung wird häufig und in allen Fällen, in denen Mängel vorhanden sind, häufiger ausgetauscht • Handschuh nur über saubere und trockene Hände ziehen • In den seltenen Fällen, in denen es zu vorübergehenden Hautreaktionen und Überempfindlichkeiten kommen kann, muss die Verwendung unterbrochen werden und einen Arzt aufsuchen. **LAGERUNG UND URSORGUNG:** Das angegebene Verfallsdatum bezieht sich auf ein Produkt, das ordnungsgemäß in der Originalverpackung gelagert wurde • Gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen • Konformitätsklärung unter www.reflexx.com

SLU/PROPORȚII ZA UPORABO: Večnamenska rokavica za zaščito rok in/ali izdelka, s katerimi se rokuje • Rokavice so primarne za kontakt s čistimi kemikalijami znane za čas, ki je knjiži ob predložitvi časa, navedenega v razpredelnici kemične odpornosti • Rezultati pridobljeni v laboratorijskih pogojih morda ne odražajo dejanskega uporabnega časa. **OPREZILA:** Pred uporabo izdelka ga preizkusite v realnih okoliščinah uporabe • Izdelki niso prostovoljno obrabljivi, priporočila se pogosta menjava, vedno ko se opazijo nepravilnosti • Rokavice nosite na suhih in čistih rokah • V redkih primerih, ko lahko pride do praprodnih kožnih reakcij in preobčutljivosti, upoštevajte in se posvetujte z zdravnikom. **SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE:** Oznaceni rok trajanja velja za izdelke, ki je ustrezno shranjeni v prodajni embalaži • Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi • Izjava o skladnosti na www.reflexx.com

GR ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Πολυεπιμελής γάντιος για προστασία της χείρας και/ή του χειριζόμενου προϊόντος • Γάντιο κατάλληλο για επαφή με καθαρά χημικά προϊόντα για χρονικό διάστημα μικρότερο από το χρόνο διαπερατότητας που αναφέρεται στον πίνακα αντίστασης χημικών • Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται σε εργασιακές συνθήκες μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα που λαμβάνονται σε εργασιακές συνθήκες. **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:** Πριν από την χρήση του προϊόντος δοκιμάστε το στις πραγματικές συνθήκες χρήσης • Το προϊόν υπόκειται σε φθορά, συνιστάται η συχνή αντικατάσταση • Το προϊόν πρέπει να φορεθεί μόνο σε καθαρά, ξηρά και καλά στεγνά χέρια • Σε σπάνιες περιπτώσεις, σε περίπτωση εμφάνισης προσωρινών δερματικών αντιδράσεων και υπερευαισθησίας, διακοπή της χρήσης και επικοινωνία με τον γιατρό. **ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΙΜΙΝΗΣΗ:** Η ημερομηνία λήξης ισχύος αφορά το προϊόν, το οποίο έχει αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες. **Αποχρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες • Δήλωση συμμόρφωσης στο www.reflexx.com**

RO SFATURI DE UTILIZARE: Mânuși multifuncționale pentru a proteja mâna și/au produsul manipulat • Mânuși adecvate pentru contactul cu produse chimice pure pentru un timp inferior al timpului de permeabilitate, indicat în tabelul de rezistență chimică • Rezultatele obținute în condiții de laborator pot să nu reflecte durata efectivă de utilizare. **AVERTISMENTE:** Încercați produsul înainte de a-l utiliza în condițiile reale de folosire • Dispozitivul este supus uzurii • Se recomandă înlocuirea frecventă și în orice caz, înlocuirea în caz de imperfecțiuni • Purtați mânușile pe mâinile uscate și curate • În rarele cazuri în care pot apărea reacții cutanate transitorii și hipersensibile, întrerupeți utilizarea și consultați un medic. **STOCAREA ȘI ELIMINAREA:** Termenul de valabilitate indicat este valabil pentru produsele stocate corect conform instrucțiunilor, în ambalajele comerciale • Eliminați produsul, respectând reglementările locale • Declarație de Conformitate pe www.reflexx.com

	AQUEOUS ACQUOSI	ACID PH < 4.5 ACIDI PH < 4.5	DARY LATTIERI CASEARI	ALCOHOLS ALCOLICI	OILY, FATTY OLEOSI, GRASSI
	✓	✓*	✓	✓	✓
TESTED / TESTATI 30' AT / A 40° C					
* USE / UTILIZZO ≤ 10'					

DM 21/03/1973 | REG EU 10/2011 | REG CE 1935/2004

REG EU 2017/745 | EN 455 1,2,3 & 4

Class I	Medical device	Medizinprodukt
	Dispositivo medico	Zdravniška oprema
	Dispositif médical	Înstruțiunilor medicale
	Dispositivo médico	Apparat medical

MD

M65 C.I.M.A.C. - Via Aguzzafame 60/b, IT-27029 Vigevano (PV)

REG EU 2016/425

EN ISO 374-1:2016 Type B

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-5: 2016

EN 420:2003 + A1:2009

CHEMICALS	PROTECTION LEVEL	PERMEATION TIME (min.)	DEGRADATION INDEX (EN 374-4:20)
X - Sodium hydroxide (40%)	3	> 60'	-3,5%
P - Hydrogen Peroxide (30%)	3	> 60'	22,4%
T - Formaldehyde (37%)	3	> 60'	27,1%

LOT

Made in Malaysia

REF N71/M

8 032891 634486

Foto: Getty Images, 2018

Attenzione ai FUORI norma!

医用PVC检查手套

自然色

MEDICAL VINYL EXAMINATION GLOVES

用于医疗检查，一次性使用，左右手通用，非灭菌。
适用于医护人员在医疗机构的各环节（手术室除外），
有效保护使用者，避免交叉感染。

英科医疗



英科医疗科技股份有限公司
山东省淄博市临淄区清田路18号
电话：+86-533-6298778

英科医疗 www.ykmedical.com.cn

医疗器械生产备案凭证编号：鲁淄食药监械生产备20150012号
医疗器械备案凭证编号：鲁淄械备20150265号
医疗器械技术要求编号：鲁淄械备20150265号
其他内容详见产品使用说明书



请将本产品置于阴凉干燥处，避免阳光直射

生产日期：2020-07

LOT 生产批次：SDNX-44113

有效期：五年



6 972940 810077

Dichiarazione di Conformità



IN SAFE HANDS

REFLEXX S.p.A. Unipersonale	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	rev 02 del 29 marzo 2019
Prodotto: reflexx N85 art. N85/M- art. N85/L- art N85/XL-- art N85/XXL		
art. N85B/M- art. N85B/L- art N85B/XL-- art N85B/XXL		
<i>Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico</i>		Pag.: 1/1

GUANTI MONOUSO DA ESAME IN NITRILE SENZA POLVERE MARCHIO REFLEXX N85

La società Reflexx S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN), in qualità di Fabbricante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425 (0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420:2003 + A1 2009, EN 374-1:2016 TIPO B, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013 e EN 374-5:2016.

In fede



REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 0185450209
Tel. 0376555164 - Fax: 0376946504
e-mail: info@reflexx.com

AQL – Acceptable Quality Level

- AQL è un metodo di campionamento statistico per la ricerca di difetti in lotti di produzione massive
- **Maggiore è il VALORE dell'AQL maggiore è la possibilità di trovare un guanto difettoso**
- Tipicamente nei guanti, le difettosità ricercate sono
 - **Difetti minori:** macchie minime, bordini difettosi, piccoli grumi – AQL 4
 - **Difettosità maggiori:** lacerazioni, grosse macchie, grandi grumi – AQL 2,5
 - **Microfori:** guanti riempiti d'acqua/aria waterleak test – **AQL 1,5**

Grazie per l'attenzione!

www.reflexx.com